


# Bima combi

Mjuk och komfortabel dyna för brukare som behöver extra stöd och tryckfördelning. Passar till brukare som har låg till medelhög risk för trycksår och som själv kan variera sittandet.



Bima combi har en formad sittgrop med urtag för sittbensknölar och svanskota. Tillsammans med fastare polyeter under låren och ett mjukt kallsaum i sittgropen fördelar dynan tryck över sittytan.

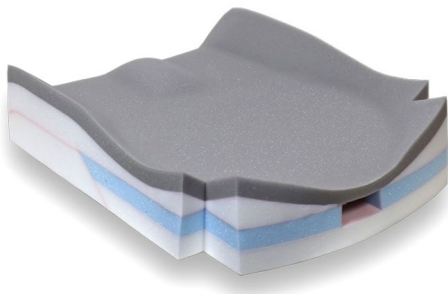

Lateralstöden och den tydliga bendelaren ger ett bra stöd. Det mjuka sittskiktet ger extra hög komfort. Konstruktionen är lätt, 45x40cm väger endast 1,0 kg.

Bima combi finns att beställa för rullstolar med hängmattesits eller för rullstolar med plan sits. För att klara brukarvikt upp till 180kg är sittbredd 52,5 – 60cm extra förstärkt med en botten av polyeten EV50.

- ✓ Komfortabel och formstabil
- ✓ Komfortskum i sittgrop
- ✓ Urtag för sittbensknölar och svanskota
- ✓ Höga lateralstöd
- ✓ Bendelare
- ✓ Högre densitet under låren
- ✓ Rundad bakkant
- ✓ Urtag för ryggrör
- ✓ Bottenform för hängmatte-/ plan sits
- ✓ Flera storlekar
- ✓ Anpassningsmöjligheter

## Överdrag

Dynan har som standard ett heltäckande överdrag av svart laminerad velour. Sittytan är monterad med motsatt fiberriktning. Det förhindrar glidning framåt och samtidigt underlättar sidoförflyttning och förflyttning bakåt.

Överdraget har en undersida av antihalkmaterial för bästa fixering i alla typer av rullstolar.

## Alternativa överdrag

Förutom standard överdraget i luftig laminerad velour finns ett inkontinens-skyddat överdrag i mjuk frotté. För att beställa Bima combi med inkontinensskyddat överdrag ange art.nr-2 (24-4545-P-2). Vid beställning av enbart överdrag ange Ö-art-nr T.ex. Ö24-4545-P-2.

## Tillbehör

Inkontinens-/skyddsöverdrag finns som tillbehör. För att förenkla vid tvätt är skyddsöverdrag utformat som en hätta med resår. För att beställa en inkontinenshätta ange INKO framför artikelnumret T.ex. INKO24-4545-P

# Anpassningar

Bima combi kan anpassas direkt i fabrik. Enligt beskrivning/skiss kan vi anpassa mått, sitsvinkel och benlängdsskillnad.

## Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Bima combi			Kupad undersida -K					Plan undersida -P		
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd <sup>tot</sup>	Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd <sup>tot</sup> = Sitsdjup på mitten						Höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58		
35	24-3535-K	24-3538-K	24-3540-K	24-3543-K					10	125
37,5	24-3735-K	24-3738-K	24-3740-K	24-3743-K	24-3745-K	24-3747-K	24-3750-K		10	125
40	24-4035-K	24-4038-K	24-4040-K	24-4043-K	24-4045-K	24-4047-K	24-4050-K		10	125
42,5		24-4238-K	24-4240-K	24-4243-K	24-4245-K	24-4247-K	24-4250-K		10	135
45		24-4538-K	24-4540-K	24-4543-K	24-4545-K	24-4547-K	24-4550-K		10	135
47,5		24-4738-K	24-4740-K	24-4743-K	24-4745-K	24-4747-K	24-4750-K		10	135
50		24-5038-K	24-5040-K	24-5043-K	24-5045-K	24-5047-K	24-5050-K		10	135
52,5			24-5240-K	24-5243-K	24-5245-K	24-5247-K	24-5250-K		10	180
55			24-5540-K	24-5543-K	24-5545-K	24-5547-K	24-5550-K	24-5555-K	10	180
57,5			24-5740-K	24-5743-K	24-5745-K	24-5747-K	24-5750-K	24-5755-K	10	180
60					24-6045-K	24-6047-K	24-6050-K	24-6055-K	10	180
35	24-3535-P	24-3538-P	24-3540-P	24-3543-P					7	125
37,5	24-3735-P	24-3738-P	24-3740-P	24-3743-P	24-3745-P	24-3747-P	24-3750-P		7	125
40	24-4035-P	24-4038-P	24-4040-P	24-4043-P	24-4045-P	24-4047-P	24-4050-P		7	125
42,5		24-4238-P	24-4240-P	24-4243-P	24-4245-P	24-4247-P	24-4250-P		7	135
45		24-4538-P	24-4540-P	24-4543-P	24-4545-P	24-4547-P	24-4550-P		7	135
47,5		24-4738-P	24-4740-P	24-4743-P	24-4745-P	24-4747-P	24-4750-P		7	135
50		24-5038-P	24-5040-P	24-5043-P	24-5045-P	24-5047-P	24-5050-P		7	135
52,5			24-5240-P	24-5243-P	24-5245-P	24-5247-P	24-5250-P		8	180
55			24-5540-P	24-5543-P	24-5545-P	24-5547-P	24-5550-P	24-5555-P	8	180
57,5			24-5740-P	24-5743-P	24-5745-P	24-5747-P	24-5750-P	24-5755-P	8	180
60					24-6045-P	24-6047-P	24-6050-P	24-6055-P	8	180

### Fakta

Klassificering: Tryckfördelande ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745

Dynans vikt: Bima combi 45x40x7cm ca 1,0 kg

Material i dynbas: Polyuretan

Material i överdrag: Svart laminerad velour, alternativt inkontinens skyddad frotté, antiglid

Rekonditionering:

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Dynbasen klarar även att ångtvättas.

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.

### Extra överdrag

För att beställa extra överdrag ange **Ö** framför artikelnumret T.ex. **Ö24-4545-P**

### Mindre storlekar

Storlekar anpassade för barn finns på separat produktblad.

**BIMA PLASTTEKNIK AB**  
*Dynor för rehabiliteringsvård*



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB  
Trålvägen 5

432 74 TRÅSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950

[info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se)

[www.bimaplastteknik.se](http://www.bimaplastteknik.se)