

Sittdyna med avlastning för svanskotan

Dynorna finns i två höjder och är avsedda för att lättare kunna resa sig efter sittande, samtidigt som de avlastar svanskotan.

Kildynorna används för att få ett något framåttippat bäcken vilket medför ergonomisk riktig sittställning.

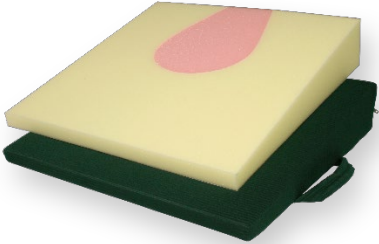

Dynbasen är tillverkad av stadig polyeter med urtag av mjuk höglastisk polyeter.

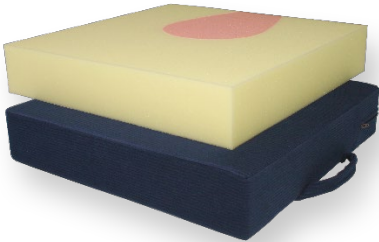

Förhöjnings- & kildynorna är försedda med handtag för att enkelt kunna bära med sig.

Köksmodell är försedd med knytband för fixering på stol.

En stor och tydlig etikett markerad "BAK" visar hur dynan ska placeras.

Artikelnummer, mått och brukarvikt

Kildyna	Bredd x djup	Art.nr 40x40cm	Art.nr 43x43cm	
	Höjd (cm)			
	6/2	B309	B309-43436	
	8/2	B3098		
	9/2		B309-43439	
	13/2		B309-434313	
	Max brukarvikt		100kg	125kg
Kildyna köks	Bredd x djup	Art.nr 39x36cm		
	Höjd (cm)			
	5/2	B310		
	7/2	B3108		
Max brukarvikt		100kg		

Förhöjningsdyna	Bredd x djup	Art.nr 40x40cm	Art.nr 45x45cm
	Höjd (cm)		
	7,5	B150	B15045
	10	B151	B15145
	Max brukarvikt	100kg	125kg
Köksdyna	Bredd x djup	Art.nr 39x36cm	Art.nr 43x40cm
	Höjd (cm)		
	7,5	B250	B25043
	10	B251	B25143
	Max brukarvikt	100kg	125kg

Rekonditionering

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Dynbasen klarar även att ångtvättas. Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.

Fakta

Klassificering: Sittdyna med avlastning

ISO-kod: 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Material i dynbas:

Polyeter 55kg/m³, höglastisk mjuk polyeter 30kg/m³

Material i överdrag: FR polyester manchester

BIMA PLASTTEKNIK AB
Dynor för rehabiliteringsvård



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5

432 74 TRÅSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950

info@bimaplastteknik.se

www.bimaplastteknik.se